

幼儿肥胖儿童健康管理软件



广州中幼产品部撰写

本操作手册版权属©广州中幼信息科技有限公司所有

未经广州中幼信息科技许可，任何组织及个人，不得上传至网络、印刷或出版

1 儿童生长发育判断标准

1.1. 营养不良

(1) 低体重：

轻度： $\text{均数}-2\text{SD} \leq \text{年龄别体重} < \text{均数}-\text{SD}$

中度： $\text{均数}-3\text{SD} \leq \text{年龄别体重} < \text{均数}-2\text{SD}$

重度： $\text{年龄别体重} < \text{均数}-3\text{SD}$

(2) 生长发育迟缓：年龄别身（长）高 $< \text{均数}-2\text{SD}$

(3) 消瘦：身（长）高别体重 $< \text{均数}-2\text{SD}$

1.2. 超重和肥胖

(1) 身（长）高别体重 $> \text{均数}+2\text{SD}$ 的儿童，要进行体质指数（BMI）值的计算

(2) 计算公式

$$\text{BMI} = \text{体重 (Kg)} / \text{身（长）高的平方 (m}^2\text{)}$$


(3) 评价（P 表示百分位数法）


超重： $\text{BMI} > \text{P}85\text{th}$

肥胖： $\text{BMI} > \text{P}97\text{th}$

2 测量步骤

2.1 准备工作

1. 体检仪保持连接电源，并开启 
2. 启动晨检平板，保持蓝牙功能开启
3. 打开平板的晨检软件，选择【体检】进入体检功能

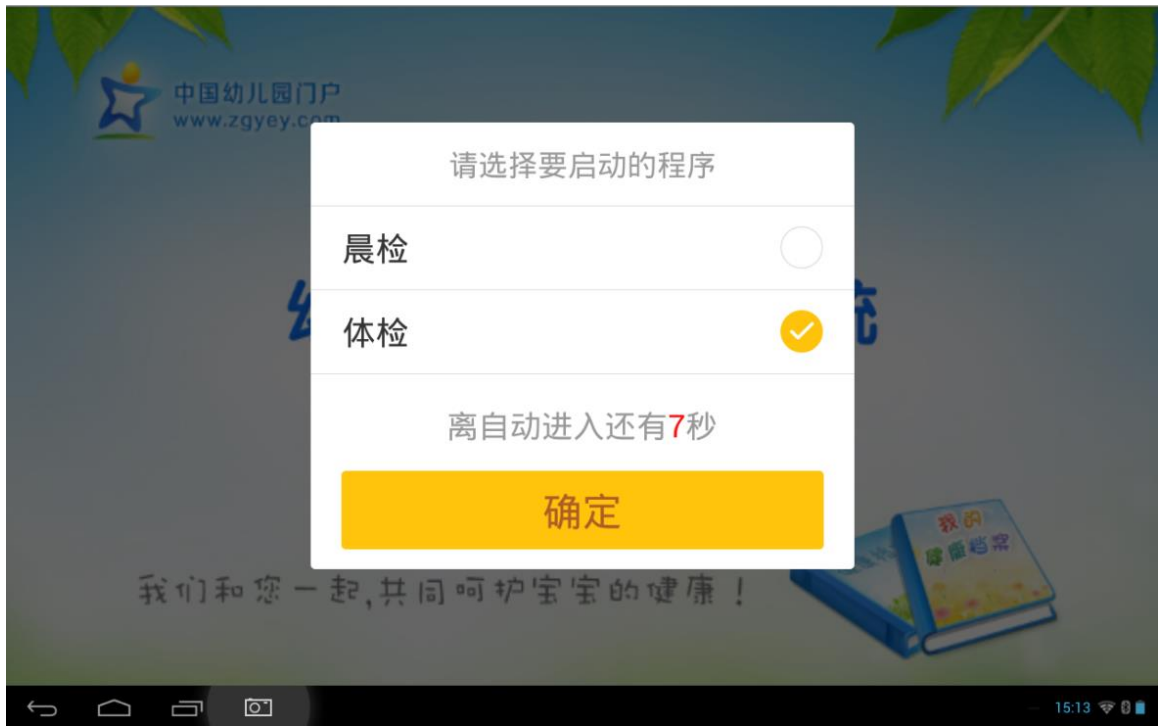

2.2 操作介绍

2.2.1 点名测量

- 1、在左侧花名册找到对应小朋友，手动勾选，选中的小朋友底色呈橘色
- 2、小朋友以自然站立的姿势站在体检仪上（建议赤足站立），测量体重

- 3、点击仪表上的【确定】按钮或通过遥控器测量小朋友的身高
- 4、通过仪表、平板查看测量结果

图例：



- 5、在平板上点击另外一个小孩子的名字，进行下一轮的测量

2.2.2 刷卡测量

系统同样支持刷卡测量。

- 1、在晨检平板上刷卡，平板播报小朋友的名字。左侧花名册也会自动选中对应的小朋友
- 2、测量完成之后，在平板上刷另外一个小朋友的卡，进行下一轮的测量

2.2.3 家长填写

家长账号登录时光树，点击首页的【健康】>>【成长指标】手动填写宝宝的身高、体重

满天星幼儿园

健康中心

记录

入园 暂无数据 离园 暂无数据

幼儿健康服务 服务介绍

每日晨检 记录孩子每日的晨检信息

健康资料 记录孩子疾病史、过敏史

健康杂志 专业的幼儿健康知识指导

成长指标 记录孩子的身高、体重

日期 2016-05-21

身高 cm

体重 kg

保存记录

历史记录

| | 日期 | 身高(cm) | 体重(kg) |
|---|----------|--------|--------|
| 1 | 2016/5/3 | 95.7 | 13.25 |


3 相关报表

3.1. PC 端报表

园长电脑登陆>>运营分析>>肥胖儿童健康管理

3.1.1 折线统计图

可以通过折线统计图了解到近一个月、两个月、三个月甚至近一年的全园/各班的幼儿生长发育变化趋势

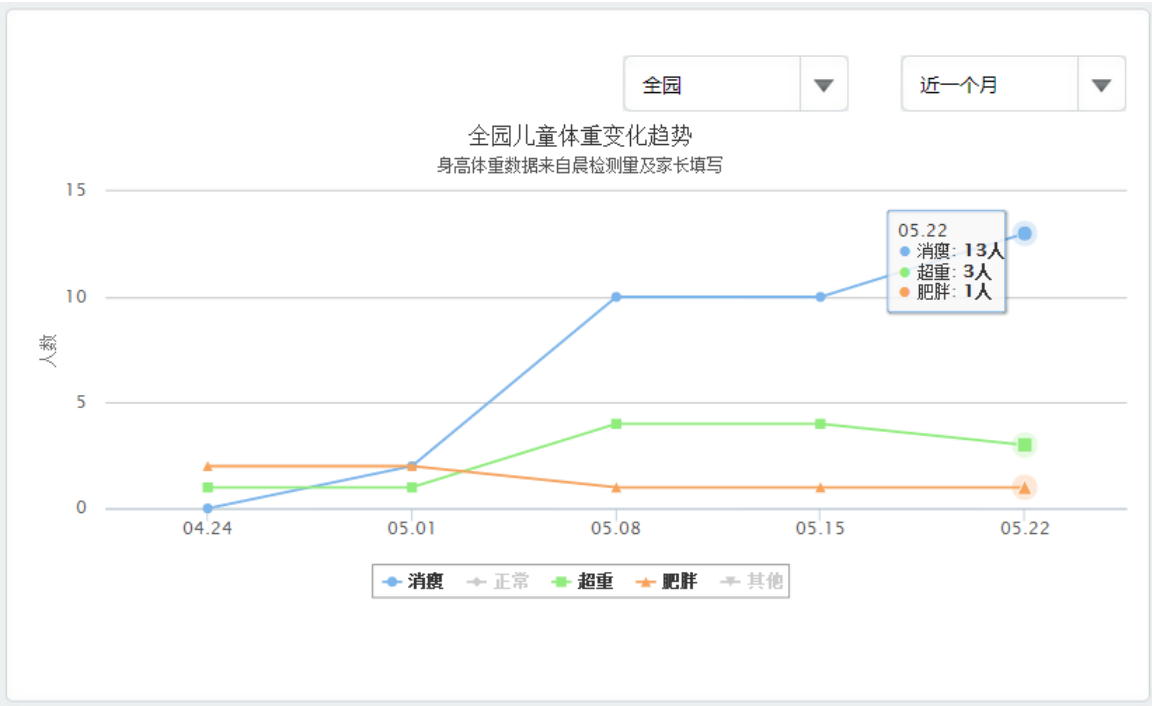

3.1.2 数据报表

可以通过数据报表了解全园幼儿的最新生成发育情况



全园儿童体重现状

导出Excel表

| 年级 | 班级 | 总人数 | 消瘦 | 正常 | 超重 | 肥胖 | 其他 |
|-----|------|-----|----|----|----|----|----|
| 小班 | 小二班 | 24 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 小班 | 小三班 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 小班 | 小一班 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 中班 | 中一班 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 学前班 | 学前二班 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |




1

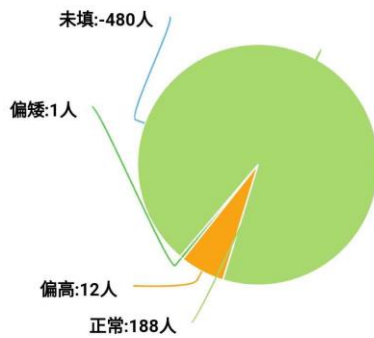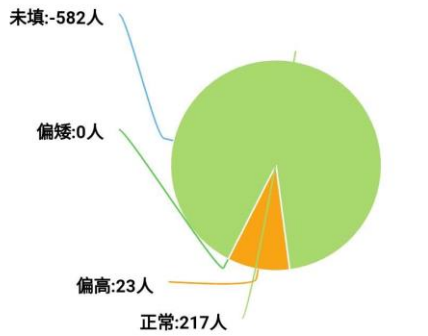

3.2. APP 报表

家长账号登录点击首页的【健康】>>【成长指标】

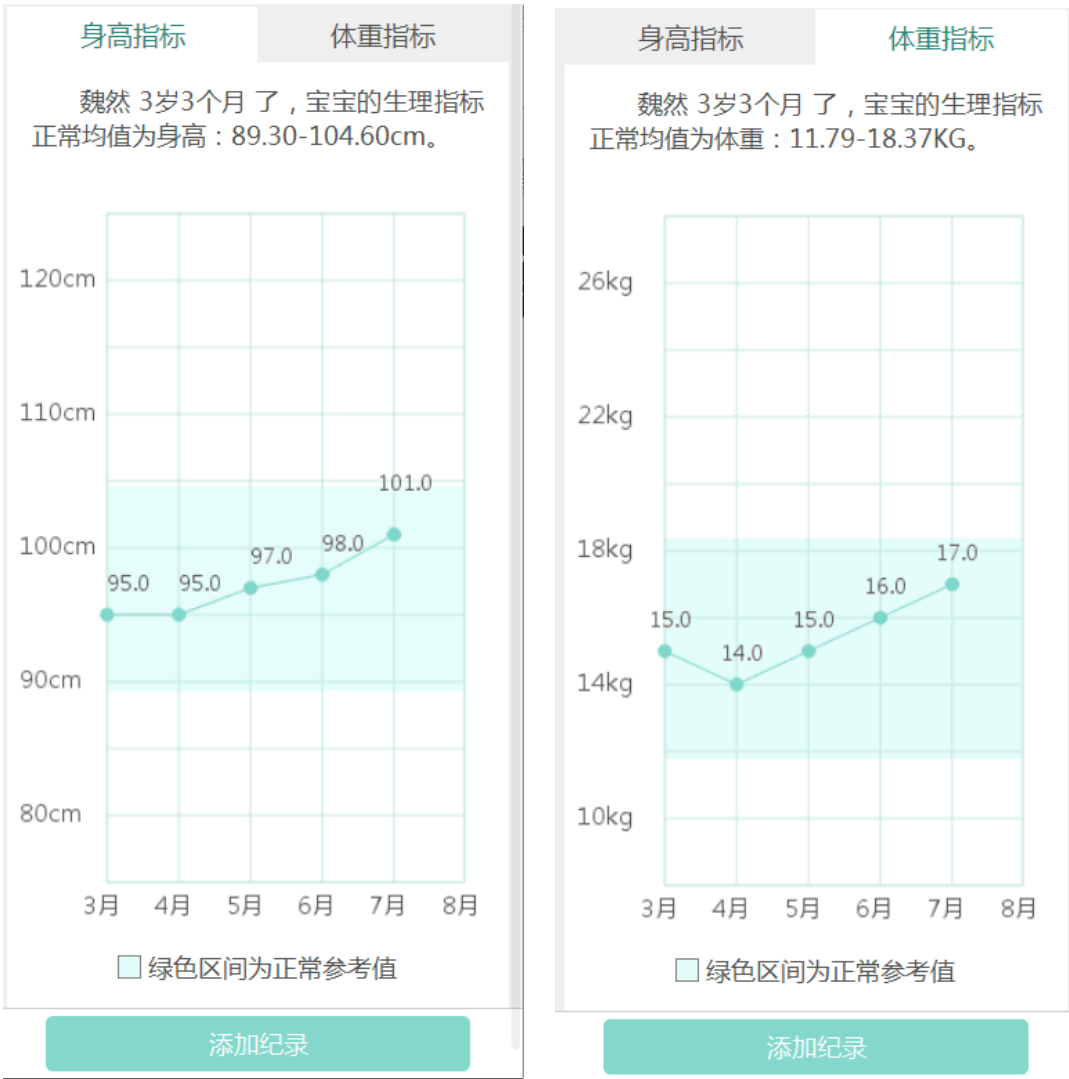

家长可以在手机端，收到身高体重测量结果。

